
Merksblatt

Problemquellen Sauerstoffkonzentrator

Alarm beim Sauerstoffkonzentrator

Wenn Ihr Gerät einen lauten Alarm abgibt und die grüne Lampe nicht leuchtet, kann dies mehrere Gründe haben. Hier finden Sie die häufigsten Ursachen mit entsprechenden Lösungen, um das Problem selber zu beheben:

Ist die Stromversorgung gewährleistet?

- Kontrollieren Sie die Stromkabel an der Steckdose und am Gerät.
- Wechseln Sie das Stromkabel an eine andere Steckdose, verwenden Sie keine Mehrfachstecker.

Ist die schwarze Kugel in der Literanzeige korrekt eingestellt?


- Falls die Kugel auf «0» ist, drehen Sie sie auf die korrekte Einstellung hoch. Der Alarm stellt dann nach kurzer Zeit ab.

Kann der Sauerstoff frei durch den Schlauch fließen?

- Entfernen Sie zur Kontrolle den Schlauch vom Gerät und warten Sie eine kurze Zeit ab, ob der Alarm verschwindet.

Hat das Gerät genügend Luftzufuhr?

- Stellen Sie den Konzentrator mit mindestens 20cm Abstand zur Wand in den Raum.
- Stellen Sie den Konzentrator in einen Raum mit Fenster und lüften Sie diesen regelmässig.
- Reinigen Sie den Grobstaubfilter regelmässig.

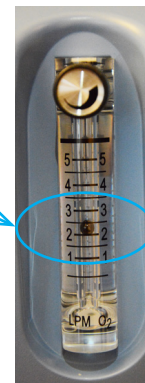

Sauerstoffversorgung funktioniert nicht

Obwohl Ihr Gerät keinen Alarm abgibt, haben Sie das Gefühl, keinen Sauerstoff über die Sauerstoffbrille zu erhalten. Mögliche Ursachen und deren Lösungsvorschläge sind folgende:

Der Sauerstoffschlauch hat ein Loch.

- Ersetzen Sie den defekten Schlauch.

Sie nutzen eine Befeuchterflasche und die Flasche hat einen Riss oder ist nicht korrekt zuge dreht.

- Ersetzen Sie die Flasche bei einem Defekt.
- Drehen Sie die Befeuchterflasche korrekt zu.

Kontrolle Sauerstoffversorgung

Eine einfache Kontrolle, ob Sauerstoff aus der Sauerstoffbrille kommt, können Sie selber durchführen. Dazu füllen Sie ein Glas mit Wasser und halten die Sauerstoffbrille ins Wasser. Wenn es blubbert, funktioniert die Sauerstoffversorgung.

